





Wir sind seit 1857 im Bereich der Tierzucht, Tierkennzeichnung und Veterinärmedizin tätig. Mit einer Produktpalette von über 4.500 Artikeln sind wir ein sehr facettenreiches Unternehmen, das weltweit agiert. Besonderen Wert legen wir dabei auf Produkte zur Zucht und Pflege von Pferden. Dabei verfügen wir über folgende Kernkompetenzen, die uns seit über 150 Jahren ein erfolgreiches Bestehen am Markt ermöglichen und für Sie als Kunden den Unterschied ausmachen:

Qualität

Qualität ist seit unserer Gründung ein essentieller Bestandteil unseres Handelns. „Made in Germany“ ist dabei nicht nur ein Bekenntnis zu unseren Wurzeln. Diesem Gütesiegel versuchen wir täglich in allen Bereichen gerecht zu werden. Unsere ISO-Zertifizierung ist einer unserer Belege für diesen Qualitätsanspruch.

Zuverlässigkeit

Vor dem Hintergrund unseres langjährigen Bestehens und unserer Tradition wird ersichtlich, dass damals wie heute Zuverlässigkeit eine Selbstverständlichkeit für uns ist. Sie ist ein wichtiger Bestandteil im respektvollen Umgang mit anderen Menschen.

Technologie

Unsere Tradition verpflichtet uns aber auch, den Blick nach vorne zu richten und stets an innovativen Lösungen zu arbeiten. In enger Zusammenarbeit mit den Anwendern werden laufend neue Produkte entwickelt und optimiert.



Seit September 2001 ist Hauptner und Herberholz nach den internationalen Standards für Qualitätsmanagement zertifiziert (DIN ISO 9001:2008) und wird jährlich durch einen externen Auditor überprüft.

© H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co. KG, Solingen

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltsverzeichnis

Pferdezucht

Pferdeschermaschinen und Zubehör

4-13

Messstöcke

14-15

Hufmesser

16-17

Hufpflege

18-20

Maulgatter

21

Pferdepflege / Fellpflege

22-25

Stallbedarf

26-30

Instrumente und Diagnostik

Kastrierzange

31

Thermometer, Doppelstethoskop und Spekula

32-33

Pferdekennzeichnung

Transponder

34

Lesegeräte

35-37

Liefer- und Zahlungsbedingungen

38

Neu

Electric 2020 Akku - Pferdeschermaschine -



- ✓ **Besonders leiser Lauf (ca. 72 dB)**
- ✓ **Ergonomisch Ausbalanciert**
- ✓ **Lange Laufzeit**
- ✓ **Li-Ionen Technologie**
- ✓ **Leicht**
- ✓ **Bewährte Hauptner Schertechnologie**

Akku Pferdeschermaschine

mit Standardscherkämmen und Schritthöhe 3 mm

89533.000

Im Lieferumfang enthalten:

- ✓ Schermaschine
- ✓ 1 Satz Schermesser
- ✓ 2 Akkus 4000mAh
- ✓ Ladestation
- ✓ Koffer mit Reinigungspinsel und Spezialöl
- ✓ Scherkopf für Pferde

89500.800

Technische Daten

Schnittbreite	76 mm
Akkutyp	Li-Ionen
Netzspannung Ladeteil	100 -240V AC
Lärmemission	72 dba
Akku-Ladezeit	2:44 Stunde
Betriebszeit geladen	2 Stunden
Maße	315 mm lang, 55 mm breit
Gewicht	1270 g

Electric 2020 Akku Zubehör

Akku für Electric 2020 Akku Schermaschinen


Li-Ionen Akku 4000mAH
Ladezeit 2:44 Stunden, Betriebszeit 2 Stunden 89530.040



Li-Ionen Akku 2000mAH
Ladezeit 1:15 Stunden, Betriebszeit 41 Minuten 89530.030



Siehe Kammkombinationen

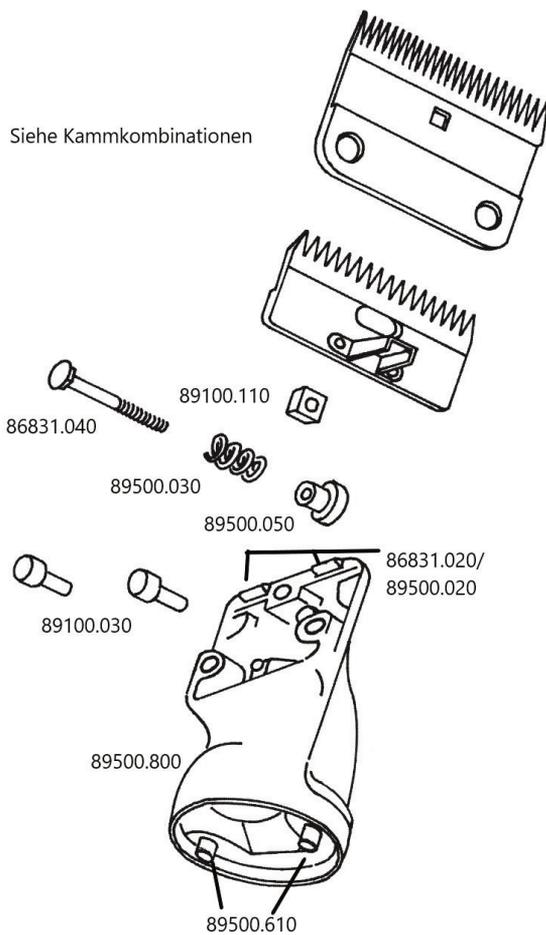

Art. Nr.	Ersatzteil
89500080	Zahnrad
89530650	Ladeteil
89530040	Akku
tba	Schraubendreher
tba	Motorteil komplett
89500800	Scherkopf Pferd/Rind komplett (ohne Kammplatten)
89600800	Scherkopf Schaf komplett (ohne Kammplatten)
89530650	Ölflasche
89600410	Bürste
89600420	Bürste Profi
tba	Koffer
tba	Einlage Koffer
87100870	Getriebefett in Dose
siehe Übersicht Seite 2	Kammplatten

Scherkämme für Pferde



Standard - Oberkamm 17 Zähne, einzeln

86833.000

Standard - Unterkamm 28 Zähne, einzeln

86872.000

Schnitthöhe 3 mm



Nachschur - Oberkamm 17 Zähne, einzeln

86833.000

Nachschur - Unterkamm 35 Zähne, einzeln

86842.000

Schnitthöhe 3 mm

Kämme für Island Ponys und Problemfell (Cushing)



Grobschur - Oberkamm 22 Zähne, einzeln

86863.000

Grobschur - Unterkamm 18 Zähne, einzeln

86862.000

Schnitthöhe 3 mm



Spezialkamm - Oberkamm 17 Zähne, einzeln

86833.000

Spezialkamm - Unterkamm 35 Zähne, einzeln

86842.020

Schnitthöhe 2 mm



Spezialkamm - Oberkamm 17 Zähne, einzeln

86833.000

Spezialkamm - Unterkamm 35 Zähne, einzeln

86844.010

Schnitthöhe 1 mm



Spezialkamm - Oberkamm 17 Zähne, einzeln

86833.000

Spezialkamm - Unterkamm 35 Zähne, einzeln

86845.010

Schnitthöhe 1/10 mm

Electric 2000 PLUS - Pferdeschermaschine -

- ✓ **modernes Design in Trendfarben!**
- ✓ **besonders leiser Lauf (ca. 75 dB)**
- ✓ **vibrationsreduziert**
- ✓ **optimiertes Getriebe**
- ✓ **hohes Durchzugsvermögen**

Gut und bewährt:

- leistungsstarker Motor
- geringes Gewicht, ca. 1025 g
- sehr handlich durch ergonomische Form
 - > Ø 51-53 mm im Handbereich
 - > 28,5 cm kurz
- Einhandbedienung
- elektrischer Überlastungsschalter
- Top-Qualität-Scherkämme (sehr oft nachschleifbar!)



Pferdeschermaschine

mit Standardscherkämmen 86833 und 86872
Schnitthöhe 3 mm

lila 89503.110

weinrot 89503.330



Einstellen der Kammlatten bei der Electric 2000 PLUS - Pferdeschermaschine -

- 1) Alte Kammlatten demontieren, indem die Reguliermutter gelöst wird, bis sich die Schraube drehen und heraus ziehen lässt. Entfernen Sie die Kammlatten. Achten Sie darauf, dass sich die Reguliermutter nicht von der Schraube löst, da sonst Einzelteile verloren gehen könnten.
 - 2) Reinigen Sie mit einer Bürste gründlich den Kopf der Schermaschine
 - 3) Richten Sie den Exzenterstein so aus, dass anschließend die Führung des Oberkamms leicht eingesetzt werden kann. Achten Sie darauf, dass die Flächen sauber sind.
 - 4) Setzen Sie den Unterkamm auf und richten Sie die Schraube so aus, dass die Kämme gehalten werden
 - 5) Drehen Sie die Reguliermutter bis zum ersten spürbaren Widerstand und danach noch 1 1/4 Umdrehungen (siehe Markierung an Reguliermutter)
- > Die Schermaschine ist nun einsatzbereit! Wichtig ist, die Schermaschine beim Scheren regelmäßig zu ölen, dies sollte im angeschalteten Zustand passieren.

Jede Pferdeschermaschine wird komplett mit Scherkämmen, Ölflasche und Anleitung im Kunststoff-Koffer geliefert.

Electric 2000 PLUS - Ersatzteile - für die Pferdeschermaschine -



Kompletter Getriebekopf, schwarz
mit Kammplatten für Pferde 86872 und 86833

89503.600

Hinweis:

Die Getriebeköpfe für die Pferdeschermaschine sind nicht mehr mit den Getriebeköpfen für die Schafschermaschine austauschbar!



Öl
120 ml Flasche

89500.650



Öl
1 Liter Kanister

87500.000



Bürste
robust und klein, zum Reinigen der Kammplatten

89600.410

BONUSKARTE !!!

... für unseren Qualitätsschleifservice im Haus!



• **Wenn Sie 5 Kammpaare bei uns schleifen lassen, bekommen Sie mit unserer Bonuskarte das 6. Mal Kämmschleifen gratis!**

- bezieht sich auf Original-Hauptnerkammpaare
- nur gültig für Rinder- und Pferdescherkämme
- kann nur beim hauseigenen Schleifservice eingelöst werden


Reparatur und Nachschleifen:

Wenn Ihre Schermaschine repariert werden muss oder die Kämme nachgeschliffen werden müssen, können Sie die Maschine oder die Kämme gerne an uns schicken. Fügen Sie eine kleine Notiz hinzu, was repariert werden soll oder was die Schermaschine für Unregelmäßigkeiten aufweist und dann erledigen wir gerne diese Arbeit für Sie! Wünschen Sie einen Kostenvoranschlag, notieren Sie dies ebenfalls und fügen Sie in jedem Fall Ihre Kontaktdaten, wie Adresse und Telefonnummer hinzu! Die Anschrift ist wie folgt:

H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH und Co. KG, Kuller Str. 38-44, 42651 Solingen

Ersatzteile

Siebfilter	89100.960
Schraube	89100.970
Zahnrad M / Stahlnabe	89500.080
Satz Schrauben und Unterlegscheiben	89500.610
Scherkopf komplett, ohne Kammlatten	89500.800
Zapfen zum Unterkamm	89100.030
Ersatzprofilstück	86831.020
Spiral-Spannstift zu 86831.020	89500.020
Reguliermutter	89500.050
Druckfeder	89500.030
Führungsschraube	86831.040
Exzenterstein	89100.110
Exzentersteine, 5 Stück	89500.110

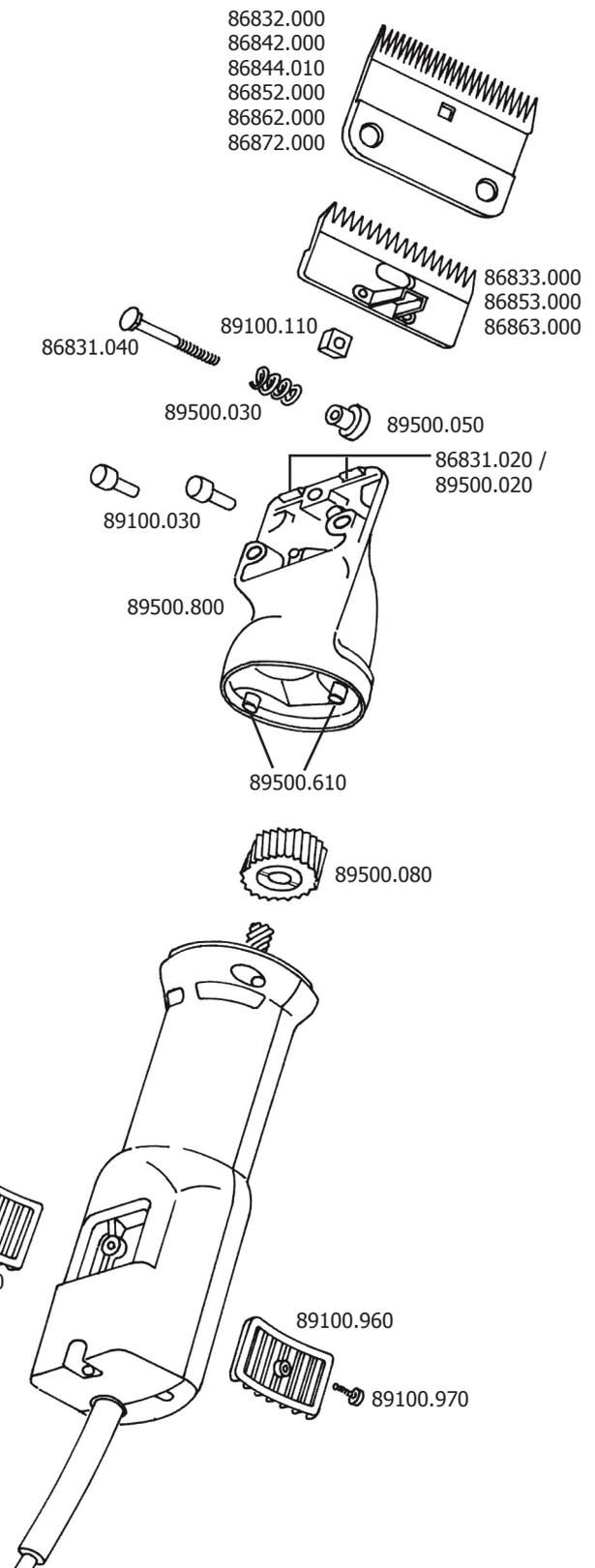

andis **Schermaschinen**



andis „Modell Ultra-Edge“ brushless bordeaux

- Snap-On Scherkopfsystem
 - Drehmotor mit zwei Geschwindigkeitsstufen: 1. Stufe ~3000 Hübe/min und Antrieb 2. Stufe ~3800 Hübe/min
 - Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz
 - robustes Gehäuse
 - Kabellänge: 3 m
 - Gewicht: ca. 500 g
 - Farbe: burgund
- inkl. 1,5 mm Scherkopf und Scherkopföl

88406.000



andis **Akku-Schermaschine** „Modell Pulse ZR II“

- Kabellose Schermaschine mit Lithium-Ionen-Akku
- 2 Stunden Betriebszeit bei voll aufgeladenem Akku
- 5 Geschwindigkeiten (1800 - 3800 Hübe pro Minute)
- Ergonomisches Design
- Geringes Gewicht
- inclusive 2. Akku

88403.000

andis Akku-Schermaschine „Modell Vida“

Das neue kleinere, schlanke Profil passt besser in die Hände der Kunden und reduziert die Ermüdung von Handgelenk und Händen, während der USB-C-Ladepunkt ein kabelloses Erlebnis ermöglicht. Mit dieser kabellosen Haarschneidemaschine mit verstellbarer Klinge lassen sich problemlos bis zu 5 verschiedene Längen einstellen

Schlankes, leichtes Design – basierend auf dem Feedback der Kunden.


Verbessertes 5-Positionen-Klingendesign.
Hochwertiger, gewichteter Ladeständer.

- Gewicht: 278 Gramm
- Laufzeit: 90 Minuten
- Ladezeit: 60 Minuten
- Akku: Fixer LithiumIonen Akku
- Laden per USB Schnittstelle
- USB Ladetechnologie

Farbe Beere
Grün

88408.000
88409.000



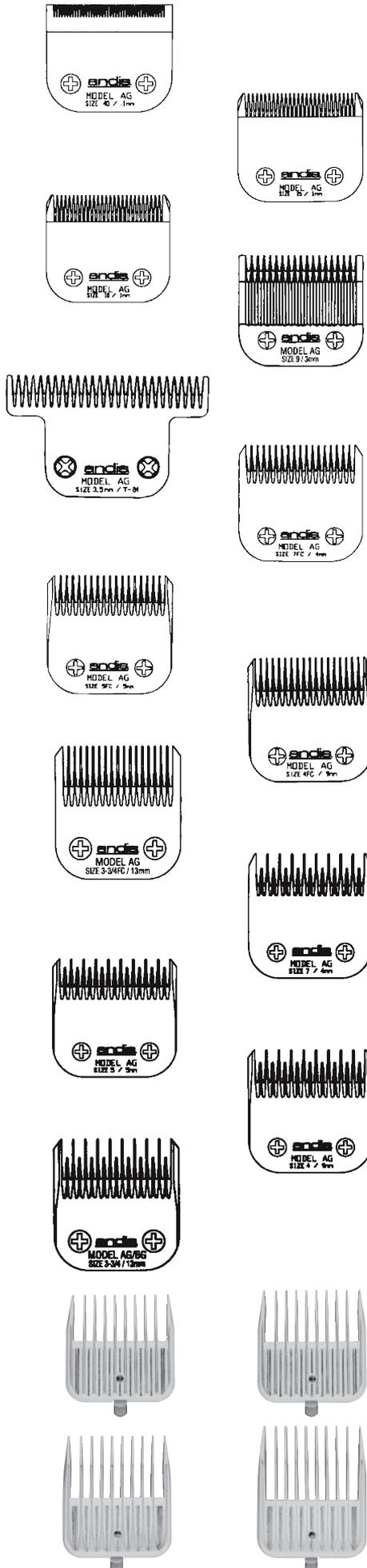

andis Scherkämme

Chirurgischer Schnitt, schneidet sehr kurz

Schnitthöhe 0,25 mm / 1/100", Größe 40

88420.000

Medium Schnitt

Schnitthöhe 1,2 mm / 3/64", Größe 15

88421.000

Medium Schnitt, schneidet sehr kurz

Schnitthöhe 1,5 mm / 1/16", Größe 10

88422.000

Medium Schnitt

Schnitthöhe 2 mm / 5/64", Größe 9

88425.000

Extra breites T-Messer

Schnitthöhe 2,4 mm / 3/32", Größe T84

88429.000

Nacharbeitsmesser, letzter Schnitt

Schnitthöhe 3,2 mm / 1/8", Größe 7

88430.000

Nacharbeitsmesser, letzter Schnitt

Schnitthöhe 6,3 mm / 1/4", Größe 5

88431.000

Nacharbeitsmesser, letzter Schnitt

Schnitthöhe 9,5 mm / 3/8", Größe 4

88432.000

Nacharbeitsmesser, letzter Schnitt

Schnitthöhe 13 mm / 1/2", Größe 3

88433.000

Effiliermesser

Schnitthöhe 3,2 mm / 1/8", Größe 7

88440.000

Effiliermesser

Schnitthöhe 6,3 mm / 1/4", Größe 5

88441.000

Effiliermesser

Schnitthöhe 9,5 mm / 3/8", Größe 4

88442.000

Nacharbeitsmesser

Schnitthöhe 13 mm / 1/2", Größe 3

88443.000

Satz Aufsteckkämme, 4 Stück

passend für 8422,
Größe ca. 3 mm, 6 mm, 9 mm und 13 mm

88449.000

Haarscheren

Unsere Haarscheren werden ausschließlich aus hochwertigem Schnittstahl gefertigt, eisgehärtet und tragen das Qualitätssiegel

Solingen

Haarschere mit einseitiger Mikroverzahnung

gebogen, 19 cm, nichtrostend

72321.000



Haarschere mit einseitiger Mikroverzahnung

gebogen, 16,5 cm, nichtrostend

72324.000



Haarschere mit einseitiger Mikroverzahnung

gerade, 19 cm, nichtrostend

72322.000



Haarschere mit einseitiger Mikroverzahnung

gerade, 16,5 cm, nichtrostend

72325.000



Haarschere mit einseitiger Mikroverzahnung

gerade, 21 cm, mit Fingerhaken, nichtrostend

72326.000



Handscheren für Pferde

Handschere „Hauptner-Perfect“, grob gezahnt

ca. 3 mm Schnitthöhe, Schnittbreite ca. 53 mm

85280.000

Messer

85280.010

Kamm

85280.020



Handschere, besonders fein gezahnt

ca. 3 mm Schnitthöhe, Schnittbreite ca. 55 mm

85370.000

Messer

85280.010

Kamm

85370.020



Fesselschere


besonders robuste, geschmiedete Ausführung, 18 cm, für Pferde

85200.000



Messstöcke

- werden aus Messing hergestellt, vernickelt
- sind reine Handarbeit und äußerst robust
- einzeln auf Funktion und Qualität kontrolliert
- einfach zu handhaben
- wartungsfrei - bei fachgerechter Anwendung
- genaue Anleitung liegt jedem Messstock bei

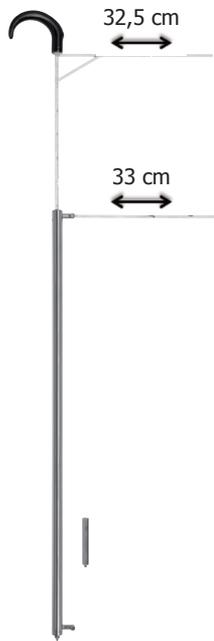

Messstock

für Pferde, in Spazierstockform, maximale Messhöhe 180 cm inklusive beiliegendem Verlängerungsstück von 10 cm (70190.300), Gewicht 1,3 kg

Messbereich:

Höhe: 96 - max. 180 cm (inkl. Verlängerungsstück)

Länge: 94 - 168 cm

Breite: 7 - 80 cm

70190.000

Messarme

- Die zur Messung erforderlichen Messarme sind im Messstock integriert. Zur Messung der Widerristhöhe ist nur der obere Messarm erforderlich. Durch das Auseinanderziehen des Messstockes wird der Messarm an der Innenseite des Vierkantstabs sichtbar. Er kann einfach herausgezogen und nach oben so weit aufgeklappt werden, bis er arretiert. Durch weiteres Aufschieben des Messstockes wird der zweite Messarm gleich unter dem Ersten sichtbar. Zur Entnahme des zweiten Messarms muss der Messstock so weit aufgeschoben sein, dass der Messarm völlig frei liegt. Nun wird er leicht nach oben geschoben, damit er von der oberen Rundung des Messstockes eingeschoben und die hierfür vorgesehene Aufnahmehalterung an der oberen Rundung des Messstockes eingeschoben und aufgeschraubt werden kann.

Höhenmessungen

- Genaue Messergebnisse sind nur in senkrechter Lage des Messstockes zu erreichen. Bei Messungen auf weichem Untergrund dringt die Spitze am Ende des Messstockes ca. 1,5 cm in den Boden ein. Dies ist auf der Maßskala bereits berücksichtigt und bedarf keiner Bedeutung. Bei Messungen auf festem Boden, in den die Spitze nicht eintauchen kann, ist zu beachten, dass dem ermittelten Messwert 1,5 cm hinzugerechnet werden muss.

Verlängerungsstück

- Bevor das beiliegende Verlängerungsstück auf den Messstock aufgeschraubt werden kann, muss die Spitze am Ende des Messstockes entfernt und auf das Verlängerungsstück aufgeschraubt werden. Bei allen Messungen mit Verlängerungsstück ist zu berücksichtigen, dass dem ermitteltem Wert 10 cm auf weichem und 11,5 cm auf festem Boden hinzugerechnet werden muss.

Längen- und Breitenmessungen


- Zur Ermittlung von Längen- und Breitenmessung sind auf dem Vierkantstab des Messstockes besondere Skalen vorhanden, von denen die entsprechenden Werte abgelesen werden können.

Messstock

für Pferde, zur Messung der Widerristhöhe, Messarm im Messstock versenkbar, Gewicht 1,6 kg, Höhe 105 - 190 cm, vernickelt

70195.000

Die Größe eines Pferdes wird mit einem Messstock bestimmt. Der Messstock wird am Halsansatz angelegt (am höchsten Punkt des Rückens - Widerrist). Vom Boden aus wird bis zum Widerrist gemessen. Mit der so gemessenen Körperhöhe des Pferdes erhält man das Stockmaß. Der Messarm ist bei diesem im Messstock versenkbar.

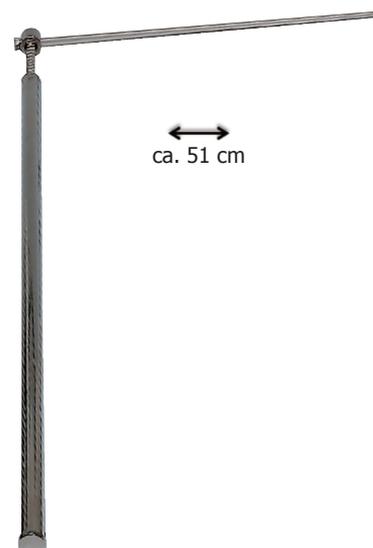


Messband

Rollmaßband

mit Wasserwaage, zur Höhen-, Breiten- und Längenmessung, Bandanfang mit umklappbarer Trittfläche, damit Höhenmessungen von einer Person durchgeführt werden können. Teleskopmessarm einschiebbar, Messbereich von 8 - 300 cm, Gewicht 220 g

70300.000

Messbänder sind zur Beurteilung der Gewichtsentwicklung oder als Maßband zu verwenden.

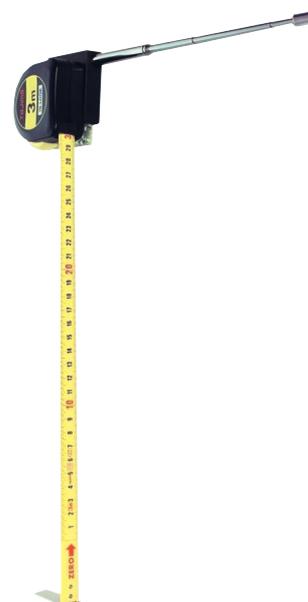

Nasenbremse

Nasenbremse

mit Holzgriff und kräftigem Geflecht, 21 cm

02800.000



Hufmesser

Handwerkliche Arbeit mit anschließender Qualitätskontrolle garantieren ein sehr gutes Produkt!

- ✓ garantieren optimale Griffigkeit und Kraftübertragung durch ergonomisch geformtes Holzheft
- ✓ Einsatz von hochwertigem deutschen Qualitätsstahl (Kohlenstoffstahl)
- ✓ lang anhaltende Schneidleistung
- ✓ sorgfältigste Verarbeitung
- ✓ strenge Qualitätskontrolle während des gesamten Fertigungsprozesses
- ✓ außerordentliche Produktzuverlässigkeit durch jahrzehntelange Erfahrung und dem optimalen Verhältnis von Härte / Flexibilität, sowie Material-Zähigkeit
- ✓ optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



Hufmesser, 65 mm Schnittlänge

rechts, mit unbehandeltem Buchenholzheft

40590.000



links, mit unbehandeltem Buchenholzheft

40591.000



Hufmesser, 65 mm Schnittlänge

rechts, mit Thermo-Esche-Hartholzheft und breiter Klinge

40602.000



links, mit Thermo-Esche-Hartholzheft und breiter Klinge

40603.000



Hufmesser, 55 mm Schnittlänge

rechts, mit Thermo-Esche-Hartholzheft für kleine Pferde und Ponys

40605.000



links, mit Thermo-Esche-Hartholzheft für kleine Pferde und Ponys

40606.000



Hufmesser, 70 mm Schnittlänge

rechts, mit gebogener Klinge, nichtrostend, mit unbehandeltem Buchenholzheft

40625.000



Hufmesser, 65 mm Schnittlänge

rechts, mit schwarz gebeiztem Buchenholzheft und schmaler, vernickelter Klinge - Rostfrei

40641.000



links, mit schwarz gebeiztem Buchenholzheft und schmaler, vernickelter Klinge - Rostfrei

40642.000



Hufmesser, 70 mm Schnittlänge

rechts, mit ergonomischem Buchenholzheft, nichtrostend

40620.000



links, mit ergonomischem Buchenholzheft, nichtrostend

40621.000

Hufmesser

Hufmesser, 55 mm Schnittlänge

rechts, mit Thermo-Esche-Hartholzheft und schmaler Klinge, für feine Ausschnitte

40647.000

links, mit Thermo-Esche-Hartholzheft und schmaler Klinge, für feine Ausschnitte

40648.000

Hufmesser, 70 mm Schnittlänge

rechts, mit Thermo-Esche-Hartholzheft und breiter Klinge mit schneidendem Rücken (Doppelschneider)

40671.000

links, mit Thermo-Esche-Hartholzheft und breiter Klinge mit schneidendem Rücken (Doppelschneider)

40672.000



NEU: Extra scharfe Hufmesser!

- ✓ Verbesserte Schneidtechnologie
- ✓ Revolutionäre Griffgeometrie
- ✓ spezielle Daumenstütze für eine extrem erleichterte Handhabung

Hufmesser, extra scharf, 55 mm Schnittlänge

rechts, mit Thermo-Esche-Hartholzheft, breite Klinge

40600.000

links, mit Thermo-Esche-Hartholzheft, breite Klinge

40601.000

Hufmesser, extra scharf, 55 mm Schnittlänge

rechts, mit Thermo-Esche-Hartholzheft, schmale Klinge

40643.000

links, mit Thermo-Esche-Hartholzheft, schmale Klinge

40644.000



Zum Schärfen der Messer

Abziehstein

15 cm, 3,7 cm breit, Ø 0,1 - 0,7 cm, einfache Ausführung

41080.000



SWISS-Sharpener

geeignet für alle Schneidkanten

49035.000



Taschen-Wetzstahl

praktischer Wetzstahl, aufgrund seiner Größe leicht mitzunehmen, aufschraubbar, 11,2 cm lang, aufgeschraubt 18,5 cm lang

49037.000





Hufraspeln

Hufraspel

mit gerader, grober und feiner Raspelfläche, beidseitig und einseitig zu verwenden, 4 cm breit, 35 cm lang, Stärke der Raspelfläche: 9 mm

42512.000



Raspel

S-förmig gebogen, mit grober und feiner Raspelfläche, 30 cm lang, 2,5 cm breit

42794.000



Hufraspel

mit Angel und Kunststoffgriff, grobe Raspelfläche, handbehauen, 4 cm breit, Hieblänge: 30 cm, Stärke der Raspelfläche: 6,5 mm

42516.000



mit Angel und Holzgriff, grobe Raspelfläche, handbehauen, 4 cm breit, Hieblänge: 20 cm, Stärke der Raspelfläche: 6,5 mm

42517.000



Schleifscheibe

zur Klauenbehandlung mit 3 Löchern und Hartmetallbeschichtung, gedrehte, besonders stabile Ausführung, grobere Körnung, 115 mm Ø

42784.000



Schleifscheibe

zur Klauenbehandlung mit 3 Löchern und Hartmetallbeschichtung, gedrehte, besonders stabile Ausführung, mittlere Körnung, 115 mm Ø

42786.000

Hufschuhe

Hufschuh Shoof

In drei Größen

Größe S

K0003260

Größe M

K0003261

Größe L

K0003263



Behandlungsschuh

Einheitsgröße

K0016143



Hufpflege

Hufuntersuchungszange

mit geraden Schenkeln, 15 cm Maulöffnung, 37 cm, nichtrostend

40450.000



Hufuntersuchungszange Modell „Wien“

ca. 20 cm Maulöffnung, 40 cm, nichtrostend

40470.000



Hufschlegel

aus Hartholz, 8 cm Ø, 29 cm

40841.000



Hufbeschlaghammer

30 cm

42371.000



Hufkratzbürste

aus Kunststoff, mit Kunststoffborsten, 17 cm

68104.000



Hufkratzbürste

aus Kunststoff, mit Bürste rot

K0321145



Vetlastic Bandagen

VetLastic selbsthaft. Bandage, blau 7,5cm mittelelastische, selbsthaftende Bandage, sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen, klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst, modernes latexverstärktes High-Tech Synthetikmaterial, leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen

K0001667



Isolierband

auf Gewebebasis, für Klauenverbände, doppelseitig klebend

42796.000



Buchenholzteer

1 kg

42567.000



Huffett

Pharmakas Huf-Fett 1 L

K0001654





Hufpflege

Hufzange

mit Hebelübersetzung, Messer auswechselbar, 42 cm
42683.000

Ersatzmesser, Paar

42683.092

Schrauben

42683.100



Kneifzange

mit Nietvorrichtung, 30 cm
42461.000



Nagelziehzange

- Ideal zum Herausziehen von verschlagenen Hufnägeln -
aus Stahl geschmiedet, 30,5 cm lang
42467.000



Krokodilzange

zum Nägelanziehen, aus Stahl geschmiedet, 30 cm lang
42486.000



Hufzange

zum Abnehmen der Tragränder, aus Stahl geschmiedet,
38 cm lang
42680.000

Hufbehandlung

Bei mangelnder Hufpflege treten ernste Erkrankungen der Tiere auf, die sich durch eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes des Tieres bemerkbar machen kann. In vielen Fällen muss dann der Tierarzt operativ eingreifen, um weitere Schäden zu verhindern und die Gesundheit des Tieres und die damit verbundene Leistungsverbesserung wieder herzustellen.

Mit den Geräten auf den vorhergegangenen Seiten, kann die normale Hufbehandlung durchgeführt werden. Es ist dabei vor allem wichtig, zu lang gewachsene Hufe entsprechend zu kürzen, da sonst Schäden im Bewegungsapparat der Tiere nicht zu vermeiden sind.

Hufbock Ecoflex

für Pferde, 35 cm, vernickelt

Die neue 2in1-Lösung für die Behandlung von Vorder- und Hinterhufen mit einem Hufbock. Das Pferd kann sich bei der Hufpflege noch mehr entspannen, ohne dass Sie sein Gewicht tragen müssen.

Durch innovatives Design wird das Verletzungsrisiko bei der Hufpflege verringert.

Für verschiedene Pferdegrößen und -rassen geeignet.

Auch für ältere Pferde geeignet, die mehr Komfort und Hilfe bei der Hufpflege benötigen

K0016180



Maulgatter und -keile

Maulgatter

Maulgatter werden unter anderem bei der Zahnbehandlung, Eingabe von Medikamenten und allgemeinen Operationen verwendet. Sie dienen dazu das Maul des Tieres aufzusperren, um Untersuchungen oder Operationen vornehmen zu können. Sie verhelfen zu einer besseren Übersicht im Maul und erleichtern die Eingabe von Medikamenten, da das Tier mit Hilfe des Maulgatters daran gehindert wird, das Maul zu schließen.

Maulgatter nach Schulze

für Pferde, 35 cm, vernickelt

03110.000



Maulgatter nach Schoupé

für Pferde, 27 cm, nichtrostend

03111.000



Maulgatter nach McPherson

für Pferde, mit Nylonbändern

03113.000



Maulkeil nach Bayer

für Pferde, max. Höhe 7 cm, vernickelt

03690.000



Bürsten, Kämmen und Striegel



Pferdestriegel - Coat King

zum Entpelzen und Trimmen ihres Pferdes, extra fein, für normalhaarige Rassen, 1,5 mm Abstand, 60 Spezialklingen
68290.000



Pferdestriegel

mit Holzgriff, 8-reihig, aus Metall, 10 x 11,5 cm
68301.000



Pferdestriegel

mit Holzgriff und Kamm, 8-reihig, aus Metall, 10 x 11,5 cm
68305.000



Federstahlstriegel

mit Kunststoffgriff, doppelseitig gezahnt, Stahlansatz um 180° drehbar, dadurch beidseitig zu verwenden, 10,5 x 23 cm

68306.000



Pferdestriegel

mit Kunststoffgriff, 12,5 x 17 cm

68340.000



Stahlstriegel oval mit Handschlaufe

mit 3 Wellenzahnreihen schwarz lackiert, Länge 17 cm
Breite 10 cm

K0001816



Reformstriegel

aus Kunststoff, mit 3 Wellenzahnreihen und verstellbarer Halteschleufe, 10 x 16,5 cm

68303.000



Nadelstriegel

aus Kunststoff, mit verstellbarer Halteschleufe, 10 x 25 cm

68307.000



Pferdestriegel New Generation

Aus weichem, elastischen Spezialkunststoff, für besonders wohltuenden Massagen

K0321310



Gumminoppenstriegel schwarz

Für die wohltuende Massage. Ideal im Fellwechsel mit integriertem Handschuh

K0000329



Kunststoffnadelstriegel schwarz

Fein gezahnt

K0001885





Magnet-Massage-Striegel lila

Für die wohltuende Massage mit 7 magnetischen Massage Kugeln und Gumminoppen aus weichem Kunststoff

K0320139



Magnet-Massage-Striegel rosa

Für die wohltuende Massage mit 7 magnetischen Massage Kugeln und Gumminoppen aus weichem Kunststoff

K0320140



Pferdestriegel „Der Gute“

Aus hartem Spezialkunststoff elastisch mit besonderem Striegeleffekt

K0321302



Reitermesser mit Holz Griff, mit 5 Messern

mit formschönem Holzgriff. Klinge aus Edelstahl. 5 Messer: Hufauskratzer, Universalklinge, Rinnenmesser, Dosen- und Flaschenöffner und Mähnenklinge

K0032679

Mähnenkämme

Mähnenkamm mit Stiel

Aus Aluminium, Länge 20 cm

K0001820



Mähnenkamm

Aluminium, 13 Zähne, 11 x 5,5 cm

68260.000



Mähnenverziehmesser

mit Holzheft, einklappbar, Klinge 8 cm lang, vernickelt, Gesamtlänge 19 cm

68511.000



Oster Mähnen- und Schweifkamm blau

Stabiler und formschöner Kamm im „pocket size“ aus Kunststoff. Verfilzungen können leicht entfernt werden

K0032745



Oster Mähnen- und Schweif Bürste pink

das ausgeklügeltes Design ermöglicht leichtes Kämmen in alle Richtungen. Verfilzungen können leicht entwirrt werden

K0032992



Oster Pflegeset blau 7-teilig

Für jede Anwendung das richtige Produkt aus der Oster equine series in der praktischen Tasche. Hochwertiges Material und Verarbeitung. Ob Bürste oder Striegel, jedes Utensil hat seinen Platz, damit nichts herumliegt. Das Pflegeset besteht aus: Glanz- und Schmusebürste, Gumminoppenstriegel Grob, Mähnen- und Schweifbürste, Mähnen- und Schweifkamm und Hufreiniger

K0032748



Stallbedarf



Smart Camm Akku HD

Eine Kamera für viele Möglichkeiten! Bei Verwendung als WLAN-HotSpot kann die Kamera über das Smart-Phone direkt angesteuert werden (ohne Internetverbindung). Als Anhängerkamera eingesetzt kann man seine Tiere über eine App (UCCAM) am iPhone oder Android-Mobiltelefon überwachen.

Die Kamera verfügt über einen starken Magnethalter, somit kann sie flexibel ohne bohren und schrauben fixiert werden. Die leistungsfähigen Li-Ion Batterien sorgen für bis zu 6 h Videogenuss!

K0010812



Sattelschrank für 2 Sättel

- Hochwertiger Sattelschrank als Bausatz
- Mit einem Ablagefach
- Mit 2 Sattelhaltern
- Haken und Halter für ausreichend Platz zum Aufhängen z.B. Trensenzäumen
- Mit Luftschlitzen, abschließbar und stapelbar

Maße Breite 60cm x Tiefe 60cm x Höhe 150cm K0326132
Maße Breite 60cm x Tiefe 60cm x Höhe 106cm K0032707



Sattel Caddy faltbar

- stabiler Sattelbutler aus pulverbeschichteten Metallrohren
- Sattel-, Zaumzeug- und Putzboxhalterung, sowie zwei Haken
- fahrbar und klappbar
- geeignet für Stall, Turnier und unterwegs
- Maße Putzboxrahmen oben und unten: Breite 38 cm x Tiefe 28 cm

Breite 48 cm Höhe 127 cm Tiefe 78 cm
Gewicht 15 kg

K0321000

Stiefelreiniger zum Aufstellen

- Zum Aufstellen
- Rutsch- und trittsicher
- Komplett mit 5 Bürsten und Abklopfrost
- Robuste Edelstahlausführung
- Mühelose Reinigung mit Wasser
- Durch Zuführung von Reinigungsmittel wird einer Einschleppung von Krankheitserregern in Ställen vorgebeugt



K0039200

Heuraufe

besonders stabile Ausführung

Material: Metall verzinkt

Länge	Breite	Höhe	Stababstand
-------	--------	------	-------------

75,3 cm	47,5 cm	46,5 cm	85 mm
---------	---------	---------	-------

K0039200



Weidetränke

- stapelbar
- stabile und preiswerte Weidetränke für den Außenbereich mit Umrandung für optimale Stabilität
- Nachrüsten eines Einhängeschwimmerventils möglich
- Leicht und einfach aufzustellen

Länge	Breite	Höhe	Füllmenge
-------	--------	------	-----------

102 cm	72 cm	38 cm	150 L
--------	-------	-------	-------

130 cm	81 cm	63 cm	380 L
--------	-------	-------	-------

K022518

K023517



Weidetränke 500 L

- robustes Spezialmaterial, extrem bruchsicher und formstabil
- UV- und frostbeständig
- durchdachtes Design
- stabiler, nach innen gewölbter Innenrand
- ovale Form erlaubt ein einfaches Verladen in Kleintransporter
- großer Ablauf für schnelle Entleerung (Auslass Art. Nr. 16601 im Lieferumfang)
- Wasseranschluss und Schwimmerventil sind vor Tieren geschützt

Schwimmerventil im Lieferumfang nicht enthalten!



K0223623



Reisstrohbesen

- Spitzenqualität
- mit Holzstiel
- 4 Naht
- Stiellänge 135 cm

K0029489



Universalbesen

Mit Kunststoffrücken

- Der ideale Universalbesen für Stall, Hof und Haus!

K0029435



Dunggabel ohne Stiel

- handgeschmiedet und gehärtet

Material Länge Breite Zinken Ø Anstielung

Stahl 31 cm 23 cm 4 38 mm

K0050100



Aktionsdunggabel

- aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Stiel aus gewachster Esche 135 cm lang
- Material Stahl verzinkt mit 4 Zinken

K0050400



Stützräder für Schubkarre

- Paarweise
- Rädergarnitur zum Nachrüsten an jeden handelsüblichen Garten- und Bauschubkarren, auch bei älteren und bereits im Gebrauch befindlichen Schubkarren
- mit den zusätzlichen Stützrädern an den hinteren Standholmen kann die Schubkarre - besonders mit Schwerer Last - ohne Anstrengung gehoben werden
- Dies entlastet Rücken und Arme und erleichtert den Arbeitsalltag spürbar
- Für Garten, Landwirtschaft und Bauwesen
- einfachste Montage durch mitgelieferte Befestigungsschellen - keine Bohrung notwendig -
- patentiert



K0029396

Jetzt mit Vollgummireifen!

Serra-Kastrierzangen

- ✓ beste Qualität und Verarbeitung
- ✓ aus hochwertigem, gehärtetem Stahl mit vernickelter und verchromter Oberflächenver-
gütung
- ✓ jede Serra-Zange ist speziell auf Schnitt und Quetschungen gesetzt und geprüft, um die Gefahr von Nachblutungen zu minimieren



Serra-Kastrierzange

ca. 36 cm, die Zange verhindert das Herausgleiten des einmal erfassten Samenstranges und ermöglicht ein einwandfreies Quetschen und Schneiden, wodurch Nachblutungen weitgehend vermieden werden


38320.000

Kastration der Hengste

Durch die Zunahme des Reitsports in den letzten Jahren ist die Pferdezucht wieder wesentlich umfangreicher geworden. Viele der männlichen Pferde werden kastriert. Durch die Kastration wird das Temperament der Pferde etwas gezügelt, sodass sie leichter ausgebildet und später auch leichter geritten werden können. Grundsätzlich darf die Kastration der Pferde nur unter Narkose erfolgen, d.h. sie muss durch den Tierarzt durchgeführt werden. Im Allgemeinen werden Pferde in einem Alter von 1 1/2 Jahren kastriert.

Bei der Kastration mit der Serra-Zange wird zunächst der Hodensack gestrafft und dann ein senkrechter Hautschnitt durchgeführt. Durch diesen Schnitt wird dann der erste Hoden hervorgeholt und etwa 3-4 mal gedreht, damit der Samenstrang die notwendige Spannung erhält. Nun wird die Serra-Kastrierzange 38320.000 so angelegt, dass die glatte Seite zum Körper zeigt. Beim Schließen der Zange wird der Samenstrang automatisch zur Mitte der Zange geführt (durch die Messerform bedingt) und der Samenstrang durch den oberen Teil des Zangenmaules mehrfach gequetscht. Zuletzt greift das Messer der Zange zum Hoden hin ein und schneidet diesen Samenstrang ab. Die Kastrierzange „Serra“ ist mit einer Zahnstange versehen, in die der Gegenschenkel eingreift. Dies bedeutet also, dass die Zange automatisch geschlossen bleibt und etwa eine Minute auf dem Samenstrang liegen bleiben muss. Dadurch ist bei richtiger Anwendung der Kastrierzange die Sicherheit gegen Nachblutungen des Samenstranges gegeben. Danach wird der zweite Hoden in der gleichen Weise abgesetzt.

Ersatzteile

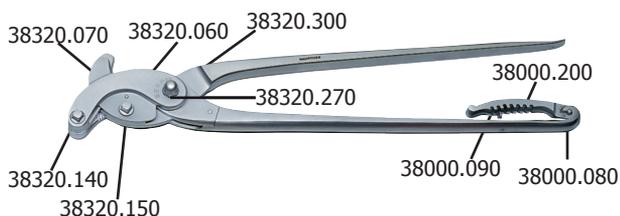

Sägemesser	38320.070
Schraube zum großen Bogen 8,0	38320.140
Schraube zum Sägemesser	38320.150
Kleiner Bogen 8,0	38320.060
Hutmutter	38320.270
Lappenschraube	38000.090
Feder zur Zahnstange	38000.080
Zahnstange	38000.200
Schlußschraube mit Stift 8,0	38320.300
Quetschstück mit Stift 8,0	38320.320
Großer Bogen komplett 8,0	38320.330

Bitte beachten Sie, dass jeder Selbsteinbau von Ersatzteilen auf eigenes Risiko erfolgt, da im Allgemeinen eine individuelle Anpassung an die Zange erforderlich ist!

Kastrierzangen

Serra-Kastrierzange

zum einhändigen Gebrauch, mit abgekröpften Schenkeln,
zur Kastration am stehenden Pferd, ca. 35 cm

38321.000



Hinweise zur Sterilisation von Serra-Zangen

Fabrikneue Instrumente sind vor der ersten Sterilisation bzw. Nutzung zu reinigen. Gegebenenfalls Schutzkappen und -folien sind vollständig zu entfernen. Serra-Zangen sind nach Gebrauch mit den beiliegenden Maulschlüsseln, Größe 6 für die Vierkantschrauben und Größe 10 für die Sechskantmutter zu demontieren, d.h. Schenkel und Kopf sind in die Einzelteile zu zerlegen. Achtung: Reihenfolge für den späteren Zusammenbau merken. Bei der Montage sind alle Schrauben handfest anzuziehen.

Serra-Zangen sind für Heißluftsterilisation und Autoklav geeignet. Sie bestehen aus festem Karbonstahl mit Nickel-Chrom Vergütung. Höchstens 15 Minuten in Desinfektionslösung legen, dann abspülen und gut trocknen.

Bedienungsanleitungen der Hersteller der Sterilisationsgeräte sind ebenfalls zu beachten. Alle Instrumente vor der Sterilisation sorgfältig reinigen. Es dürfen keine Verschmutzungen in die Geräte gebracht werden, da sich Korrosion auf andere Instrumente übertragen kann. Nach jedem Gebrauch kontaminierte Instrumente schnellstmöglich aufbereiten. Bei maschineller Reinigung Spülschatten vermeiden. Zerlegbare Instrumente in Einzelteile zerlegen. Falls nötig, bei Instrumenten mit angetrockneter Verschmutzung Ultraschallbehandlung nach Anweisungen des Geräteherstellers durchführen.

Wichtig: Trocken lagern und nicht im Stall aufbewahren! Geräte nach dem Sterilisieren gut trocknen.

Auf Vaseline kann gegebenenfalls verzichtet werden. Gelenke vor erneutem Gebrauch mit Paraffinöl behandeln, d.h. bei der Serra-Zange nur das Mittelgelenk mit der so genannten Schlußschraube, so dass diese leichtgängig wird.

Kastrierzange nach Reimers

Kastrierzange nach Reimers

mit Quetsch- und Schneidevorrichtung, 30 cm.

Diese Zange arbeitet im gleichen System wie die Serra-Zange. Dieses Modell unterscheidet sich von der Serra-Zange dadurch, dass noch ein besonderer Schnittschenkel vorhanden ist. Dieser wird als letzter Arbeitsgang betätigt d.h. also wenn die Zange ca. eine Minute geschlossen auf dem Samenstrang gelegen hat. Durch das Betätigen des Schnittschenkels fällt der Hoden ab.

38030.000



Ersatzteile

Zylinderschraube	38000.050
Schlusschraube mit Stift	38030.200
Feder zur Zahnstange	38000.080
Lappenschraube	38000.090
Platte mit Viereckloch	38030.100
Feder zum Schnittschenkel	38030.130
Hutmutter	38320.270
Zahnstange mit Stift	38000.200



Thermometer



Digitales Thermometer SC 12

speziell für Pferde, langer Temperatursensor, schnelle Temperaturmessung, wasserdicht und desinfizierbar, Messzeit: 15-25 Sekunden

00196.000



Digitalthermometer mit flexibler Messspitze

schnellmessend, Länge 120 mm

Digitales Thermometer "digi-vet19flex" mit kurzer flexibler Messspitze, Messzeit ca. 10 Sek., für Kleintiere

00192.000



Kleintier-Thermometer SC 312 Länge 130 mm

Digitales Thermometer "Didi-vet 35-3" mit Anbindeöse, wasserdicht, Signalton, Speicherung des letzten Messwertes, Messzeit ca. 10 Sek.

00191.000



Stallthermometer

Stallthermometer aus Kunststoff -30° bis +50°Celsius

K0291222

Stethoskop

Hochleistungs-Doppelstethoskop

(Rappaport Nachbau) mit Gummischlauch 80 cm, mit massivem Ganzmetallkopf, Membranen 45 mm Ø und 30 mm Ø, robust, 218 g, für Groß- und Kleintiere


01270.800



Schlauchstethoskop nach Prof. Dr. Götze

mit rotem Silikonschlauch, Membrankörper aus Metall, vernickelt und verchromt, 65 mm Ø, Top-Qualität, Gewicht 296 g, Schlauchlänge insgesamt 85 cm (35 cm + 2x 25 cm), für Großtiere

01220.000

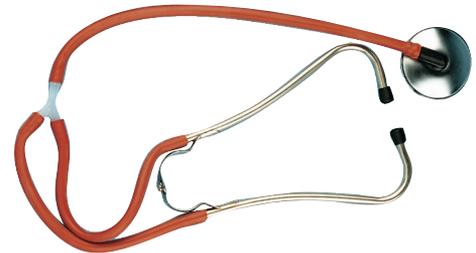

Scheidenspekula

Scheidenspekulum für Stuten

420 x 50 mm

42971.000

Ersatz-Plexiglas-Spekulum

42971.040



Transponder

- zur elektronischen Kennzeichnung von Pferden



ISO-Transponder

passiv, gebrauchsfertig, einzeln steril
in Einmalkanüle verpackt (ISO 11784/85), aus Glas, durch
den Doppelschliff der Nadel erfolgt keine
Gewebeperforation, mit Parylenebeschichtung, um das
Wandern der Transponder zu verhindern,
ca. Ø 2,2 x 12 mm

73251.000



Injektor

Einmalinjektor für ISO-Transponder (ISO 11784/85), in
handlicher Pistolenform

73301.000



Muto-Injektor

Dauerinjektor zur Aufnahme und Injektion von ISO-
Transpondern, 12 cm breit und 14 cm hoch, 380 g,
verchromt, ausbalanciert, robust und langlebig, der
ergonomisch geformte Handgriff reduziert Ermüdungs-
erscheinungen bei der Anwendung

73310.000



Einmalinjektor

mit Transponder nach ISO 11784/85, passiv,
Glastransponder gebrauchsfertig, Einweginjektoren,
einzeln steril verpackt, Ø 2,2 x 12 mm

73260.000

mit Ø 1,4 x 8 mm Transponder

73262.000


Lesegeräte

Lesemaxx Lesegerät

Das „Lesemaxx“ Lesegerät überzeugt durch:

- FDX & HDX Fähigkeit (ISO 11784/5)
- Großen Display
- Internen Speicher
- Kleine, leichte & ergonomische Form
- Wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku
- Anzeige der zuletzt eingelesenen Werte

73331.000

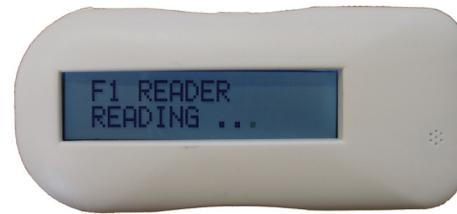

Das kleinste Lesegerät auf dem Markt!

Lesekompatibilität	FDX und HDX gemäß ISO 11784/5
Lesereichweite	HDX und FDX-B bis zu 12 cm
Stromversorgung	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
Display	2-reihig mit 16 Zeichen und LCD Hintergrundbeleuchtung
Maße	107 x 48 x 24 mm
Gewicht	50 g
Sonstiges	mehrsprachig, speichert bis zu 940 Nummern

Lesegeräte

RT100 für Transponder

Zuverlässige Tieridentifikation leicht gemacht mit Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone

73336.000



Dieses einzigartige Lesegerät ist für das Lesen von implantierten Transpondern bei Tieren wie Hunden, Katzen, Vögeln und allen anderen Haustieren und Kleintieren optimiert.

Erfasste ID-Daten können intern gespeichert und über eine Bluetooth®-Verbindung vom Speicher des Lesegeräts auf ein Smartphone übertragen werden.

Die Akkukapazität des Lesegeräts ermöglicht das Lesen von bis zu 800 ID-Nummern über mehrere Tage, ohne dass das Gerät neu aufgeladen werden muss.

- 4-zeilige OLED-Display mit jeweils 16 Zeichen
- Sieben verschiedene Spracheinstellungen (Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Polnisch)
- Leicht 155 g, ergonomische Form
- Folgende Protokolle werden unterstützt: FDX- B und HDX und zusätzlich FDX-A und EM4102 (schreibgeschützt)
- Mini USB-Port zum Aufladen
- Status LED , buzzer
- Lange Akkukapazität
-

Technische Daten

Größe: 15,5 x 8,2 x 3,3 cm, Gewicht: 155 g, Entspricht der ISO-Normen 11784, 11785 und 14223 zur Kennzeichnung von Tieren, Frequenz: 134,2 KHz
Li-ion Batterie >=1400mAh

Omni Max Universalscanner für Microchips

Universalscanner mit innovativer Antenne

Unterstützt folgende Standards

FDX-B, FDX-A/Fecava, Trovan, Avid Encrypted

FDX-B, FDX-A/Fecava Trovan HDX (Omni Max 1 Version)

Bluetooth fähig

Daten können auf den PC übertragen werden

Laden per USB Kabel



73333.600

Der neueste, tragbare Universalscanner mit dem stärksten Funktionsumfang aller verfügbaren Mikrochipscanner, wodurch er sich perfekt für die Tieridentifizierung in jeder Umgebung eignet.

Omni Max verfügt über eine innovative Antenne, die über den gesamten Umfang des Lesegeräts verläuft und so das Lesefeld für schnelles und einfaches Scannen erheblich vergrößert.

Dieses 360°-Lesefeld verbessert den Leseabstand und die Lesezeit, die für die Identifizierung entscheidend sind.

Omni Max verbessert die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Tieridentifizierung für Tierärzte, Tierheime und Tierkontrollbeamte.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

I. Geltungsbereich

1. Maßgebend für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote sind die folgenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Sollten Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer davon abweichen, gelten sie nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich genehmigen. Die Annahme der von uns gelieferten Ware gilt als Anerkennung unserer Bedingungen.

2. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor, sie dürfen nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung von uns Dritten zugänglich gemacht werden.

3. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind.

II. Preise

Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich ab Werk zuzüglich Porto- und Verpackungskosten, falls nicht andere Lieferungsbedingungen vereinbart wurden. Sie gelten grundsätzlich unversichert. Den bestätigten Preisen liegen die zum Zeitpunkt der Bestellungsannahme aktuellen Materialpreise und Löhne zugrunde. Wir behalten uns vor, bei Lieferungen die Preise in Rechnung zu stellen, die aufgrund der dann gültigen Materialpreise und Löhne maßgebend sind. Die Preise verstehen sich jeweils für ein Stück oder für die angegebene Einheit zuzüglich der am Tag der Lieferung gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen.

III. Lieferung

1. Den Versand nehmen wir für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haften jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Wahl eines geeigneten Transportweges verbleibt ebenfalls bei uns.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.

3. Geraten wir mit unseren Leistungen in Verzug, so ist uns zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Erst nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt unberührt. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn die Ware bis zum Ende der Lieferzeit das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft der Ware mitgeteilt wurde. Ersatz des Verzugschadens kann nur bis zur Höhe des Auftragswertes verlangt werden, es sei denn, der Verzug wurde von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

4. Betriebsstörungen, sowohl in unserem Betrieb als auch in dem eines Zulieferers, verursacht durch Krieg, Streik, Energiemangel, Versagen der Verkehrsmittel, Arbeitseinschränkungen oder höhere Gewalt befreien von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfristen und berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses.

5. Sofern es sich beim Versand der Güter um sperrige Artikel handelt, werden die Kosten für Verpackung und Sperrgut gesondert berechnet.

6. Der Versand durch Expressgut erfolgt grundsätzlich unfrei.

7. Auf Abruf bestellte Waren sind innerhalb der vereinbarten Zeit abzunehmen. Sollten keine Abrufe über die gesamte Menge erfolgen, wird zum Ende des vereinbarten Zeitpunktes die noch nicht abgerufene Menge zum Versand gebracht.

IV. Beanstandungen

1. Die Gewährleistungsfrist für Produktions- und Materialfehler beträgt 1 Jahr und beginnt mit dem Tag der Lieferung.

2. Beanstandungen sind nur innerhalb 10 Tagen nach Empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach unverzüglicher Untersuchung nicht zu finden sind, können nur gegen uns geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb von 6 Monaten, nachdem die Ware das Werk verlassen hat, bei uns eintrifft.

3. Bei berechtigten Beanstandungen sind wir nach unserer Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. Die Haftung für Mangelfolgeschäden bleibt ausgeschlossen, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

4. Bei Nichtgefallen der Ware ist eine Rücksendung innerhalb 10 Tagen möglich, sofern sie noch ungebraucht ist. Anderweitige Warenrücksendungen dürfen nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis erfolgen. Sonderanfertigungen (wie z.B. Prägnungen in Ohrmarken) sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen.

V. Zahlung

1. Lieferungen erfolgen grundsätzlich per Nachnahme oder Vorauskasse, falls nicht andere Lieferungsbedingungen vereinbart wurden.

2. Bei Zielrechnungen ist die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten.

3. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe des üblichen Zinssatzes für Kontokorrentkredite zu zahlen. Die Geltendmachung weiterer Verzugschäden wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

4. Gegen unsere Ansprüche kann der Auftraggeber nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn die Forderung des Auftraggebers einredebehaftet ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt.

5. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen, auch der künftig entstehenden Forderungen, unser Eigentum. Soweit die Ware vom Auftraggeber weiterverarbeitet oder umgebildet wird, gelten wir als Hersteller gemäß § 950 BGB und erwerben das Eigentum an den Zwischen- oder Enderzeugnissen. Der Verarbeiter ist nur Verwahrer. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verbunden oder verarbeitet wird, erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Gegenständen. Die Ware darf nur im gewöhnlichen und ordnungsmäßigen Geschäftsverkehr und nur dann veräußert werden, wenn Forderungen aus Weiterverkäufen nicht vorher an Dritte abgetreten wurden. Die dem Auftraggeber aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen gelten mit Abschluss des Kaufvertrages mit uns als an uns abgetreten und zwar auch insoweit, als unsere Ware mit anderen Gegenständen verbunden oder verarbeitet ist. In diesem Falle dienen die abgetretenen Forderungen zur Sicherung für uns nur in Höhe des Wertes der jeweils verkauften Vorbehaltsware. Wir werden die abgetretenen Forderungen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Auftraggeber ist aber verpflichtet, uns auf Verlangen die Drittschuldner aufzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.

6. Verpflichtungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Der Auftraggeber hat uns etwaige Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware oder auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen.

7. Falls bei Verkäufen ins Ausland der oben vereinbarte Eigentumsvorbehalt nicht mit der gleichen Wirkung wie im deutschen Recht zulässig ist, bleibt die Ware bis zur Zahlung aller unserer Forderungen aus dem durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen entstandenen Vertragsverhältnis unser Eigentum. Ist auch dieser Eigentumsvorbehalt nicht mit der gleichen Wirkung wie im deutschen Recht zulässig, ist aber gestattet sich andere Rechte an der Ware vorzubehalten, so sind wir befugt, alle diese Rechte auszuüben. Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutz des Eigentumsrechts oder an dessen Stelle eines anderen Rechts an der Ware treffen.

VI. Unmöglichkeit von Leistungen

Wird uns eine obliegende Lieferung oder Leistung unmöglich, so gelten die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit folgender Maßgabe: Ist eine Unmöglichkeit auf unser Verschulden zurückzuführen, so ist der Auftraggeber berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Der Schadenersatzanspruch des Auftraggebers beschränkt sich jedoch auf 10 v.H. des Wertes desjenigen Teils der Lieferung oder Leistung, welcher wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckmäßigen Betrieb genommen werden kann. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers, die über die genannte Grenze in Höhe von 10 v.H. hinausgehen, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

VII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel und Urkundenprozesse ist unser Firmensitz. Es bleibt uns jedoch vorbehalten, am Firmen- oder Wohnsitz des Auftraggebers zu klagen.

2. Für den Fall, dass der Auftraggeber nicht Vollkaufmann im Sinne des HGB ist, gilt der Ort unseres Firmensitzes als Gerichtsstand für das Mahnverfahren als vereinbart.

3. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

4. Auf alle durch den Kaufvertrag begründeten Rechtsverhältnisse findet ausschließlich das deutsche Recht Anwendung.

VIII. Datenschutz

Bei der Aufgabe der Bestellung ist der Auftraggeber mit der EDV-Verwertung der in seiner Bestellung aufgegebenen Daten einverstanden, soweit dies für die Auftragsabwicklung notwendig und gesetzlich zulässig ist.

IX. Verpackungsverordnung

Wir nehmen gebrauchte Transportverpackungen unseres Unternehmens zur stofflichen Verwertung oder Entsorgung zurück, sofern sie uns kostenfrei, gut sortiert, angeliefert werden. Eine einfachere Möglichkeit bieten die neu entstandenen Verwertungsgesellschaften, die dem RESY-Verband angeschlossen sind und alle Verpackungsmaterialien mit dem RESY-Aufdruck kostenfrei entsorgen. Auf Wunsch geben wir gerne die Adresse eines in der Nähe des Auftraggebers ansässigen Unternehmens bekannt.

X. Technische Änderungen

Änderungen unserer Produkte, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co. KG
Tierkennzeichnung · Tierzuchtgeräte · Veterinärinstrumente
Postfach 22 01 34 · D-42629 Solingen
Kuller Straße 38 – 44 · D-42651 Solingen
Tel.: +49(0)212/2501-0 · Fax: +49(0)212/2501-150

Notizen



H. Hauptner und Richard Herberholz GmbH & Co. KG

**Tierkennzeichnung - Tierzuchtgeräte -
Veterinärinstrumente**

Kuller Str. 38 - 44, 42651 Solingen

P.O. Box 220134, 42629 Solingen

Tel.: 0049 (0) 212 / 250 1 - 0

Fax: 0049 (0) 212 / 250 1 - 150

www.hauptner-herberholz.de

verkauf@hauptner-herberholz.de